



ESPANDI LE TUE CAPACITÀ OLTRE OGNI LIMITE

ODONTOIATRIA VETERINARIA




Per un sorriso a 32 denti



I centri specializzati in odontoiatria veterinaria, presenti in Paesi come ad esempio gli Stati Uniti, sono oggi dotati di attrezzature e conoscenze specifiche, che vanno dalla pulizia dei denti alle otturazioni di carie più o meno complesse, fino alle estrazioni e ricostruzioni dentarie. Da più di quindici anni pensiamo che negli animali domestici, come si curano le patologie della pelle, del cuore e del fegato, sia giusto trattare anche le patologie del cavo orale e in particolare dei denti, in quanto possono interferire sul benessere di tutto l'organismo.

La nostra azienda, leader da anni nel settore di odontoiatria veterinaria, offre una gamma completa di prodotti mirata alle crescenti esigenze dei clienti che affidano i loro migliori amici a quattro zampe alle cure del medico veterinario.

Riuniti veterinari elettrificati

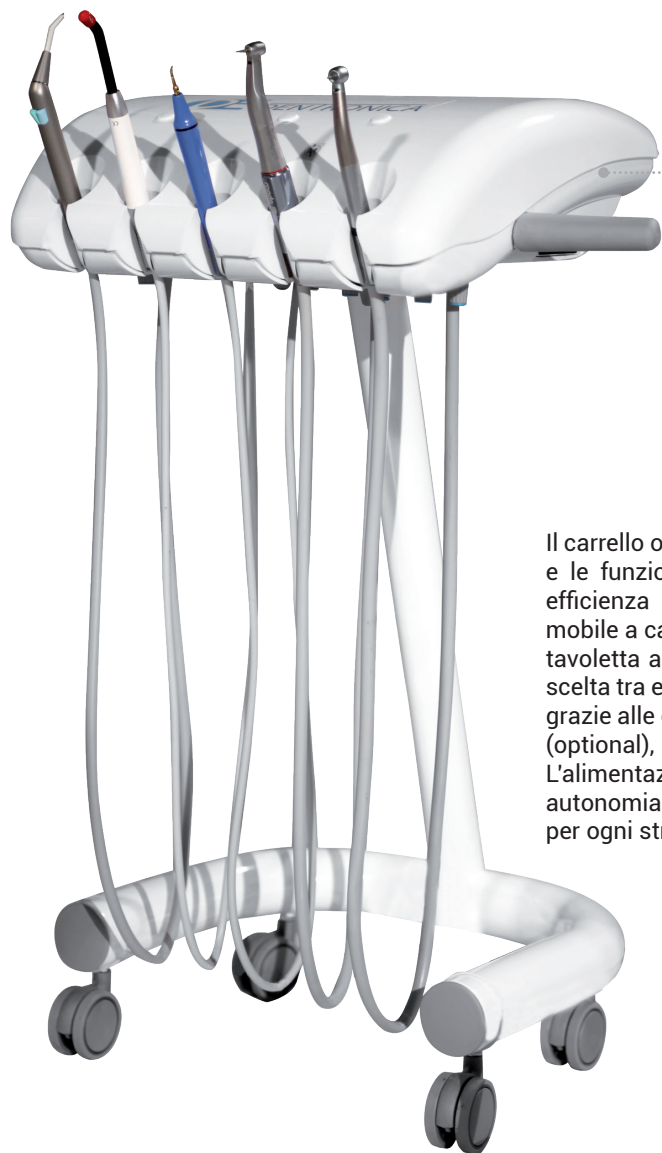

Prophy 700

Il carrello odontoiatrico Prophy 700 mette a disposizione tutti gli strumenti e le funzionalità necessarie ed è progettato per garantire la massima efficienza operativa. Dal design elegante ed ergonomico, il supporto mobile a carrello Prophy 700 consente una totale libertà di movimento. La tavoletta a cordoni pendenti è personalizzabile fino a cinque strumenti a scelta tra elettrici o ad aria. Estremamente leggero si sposta senza intralci, grazie alle comode ruote antistatiche e al ripiano portapedale in plexiglass (optional), garantendo un'interazione coordinata tra medico e assistente. L'alimentazione dell'acqua spray dal serbatoio garantisce una totale autonomia operativa; è inoltre presente la regolazione spray indipendente per ogni strumento.



Come optional è possibile ordinare il portastrumenti in ABS da posizionare sopra la faretra di Prophy 700. Sviluppa una dimensione di 375 x 275 mm. Codice DE2.00M



Tutti i comandi principali sono a portata di "piede", grazie al pedale a pressione semiproggressivo in dotazione. È dotato di funzione aria drive e acqua spray degli strumenti, inversione di marcia del micromotore e infine la funzione Endo dell'ablatore.




Come optional è possibile sostituire il pedale semiproggressivo in dotazione con quello con comando Feed Fek. La pedaliera progressiva Feed Fek attiva tutte le funzioni degli strumenti. L'azionamento degli spray può essere sempre attivo premendo il pulsante centrale e azionando la leva progressiva, oppure può essere attivato all'occorrenza premendo la sola leva inferiore. Inoltre dispone di un pulsante per l'inversione di marcia del micromotore. Il pedale può essere riposto sul portapedale in plexiglass (optional).

Scheda tecnica e dotazioni

	Prophy 700 Codice DE700E
Alimentazione aria	6/8 bar
Alimentazione elettrica	24/220V-50 Hz
Dimensioni	500x500x900 mm
Peso	15 Kg
Siringa Luzzani® Minimate in acciaio	●
Cordone per turbina/micromotore pneumatico	● 3
Kit micromotore elettrico fibra ottica	Optional
Ablatore piezoelettrico comp. Ems® 5' strum.	Optional
Ablatore piezoelettrico comp. Satelec® 5' strum.	Optional

Ablatore piezoelettrico led 5' strumento	Optional
Lampada polimerizzatrice led	Optional
Pedale a pressione semiproggressivo	●
Pedale progressivo Feed Fek	Optional
Serbatoio acqua spray 1 lt	●
Kit valvole commutazione acqua rete/serbatoio	Optional
Portapedale in plexiglass	Optional
Tavoletta tray magnetica	Optional
Garanzia	24 mesi


Riuniti veterinari pneumatici

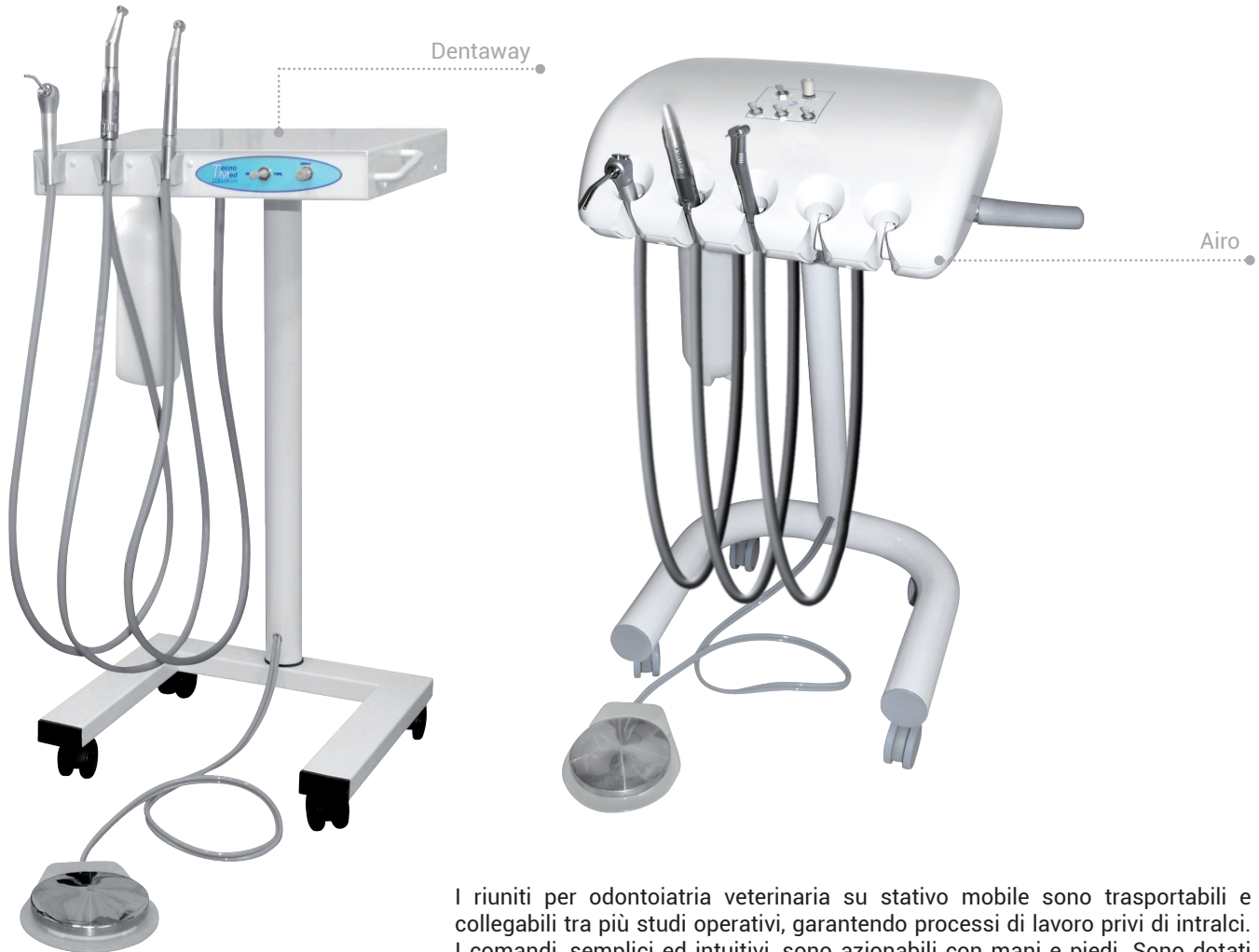

I riuniti per odontoiatria veterinaria su stativo mobile sono trasportabili e collegabili tra più studi operativi, garantendo processi di lavoro privi di intralci. I comandi, semplici ed intuitivi, sono azionabili con mani e piedi. Sono dotati di tutte le funzionalità necessarie allo svolgimento degli interventi. La qualità dei materiali utilizzati assicura una robustezza ineguagliabile. L'alimentazione dell'acqua spray dal serbatoio garantisce una totale autonomia operativa. Per il funzionamento è necessario solo il collegamento ad un compressore.



Nel pannello comandi frontale di Dentaway sono ubicati il regolatore acqua/spray e il selettore a leva dello strumento di destra o di sinistra. Nella parte inferiore è presente il selettore a leva di acqua/spray.

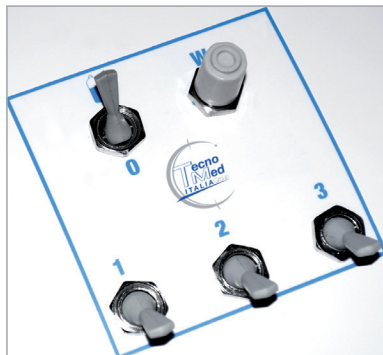

Il pannello comandi di Airo prevede: nella parte superiore il selettore a leva di erogazione acqua spray con il relativo rubinetto di regolazione; nella parte inferiore i 3 selettori a leva per la scelta degli strumenti (ad esempio: micromotore pneumatico con contrangolo, turbina e ablatore pneumatico).



I carrelli sono dotati di pedale progressivo; all'aumento della pressione corrisponde un aumento della velocità dello strumento.

Scheda tecnica comparativa e dotazioni

	Dentaway Codice UV3PN	Airo Codice DE700EP
Alimentazione elettrica	/	/
Alimentazione aria	5-8 bar	5-8 bar
Dimensioni (l x h x p)	400 x 800 x 350 mm	500x900x500 mm
Peso	10 Kg	15 Kg
Siringa DCI style	●	●
Cordone per turbina/micromotore pneumatico	● 2	● 2
Cordone per ablatore pneumatico	/	Optional
Pedale progressivo a disco	●	●
Serbatoio acqua spray 1lt	●	●
Tavoletta strumenti	Metallo	Abs
Garanzia	24 mesi	24 mesi

Riuniti veterinari mobili



Dentacase

Minimo ingombro, massima efficienza, i riuniti portatili garantiscono processi di lavoro privi di intralci.

L'alimentazione del serbatoio acqua spray, il sistema di aspirazione a depressione d'aria e il compressore silenzioso incorporato li rendono perfettamente autonomi, permettendoti di posizionarli e trasportarli ovunque. I comandi, semplici ed intuitivi, sono azionabili con mani e piedi. Sono dotati di tutte le funzionalità necessarie allo svolgimento degli interventi. La qualità dei materiali utilizzati assicura una robustezza e un design ai massimi livelli.



Nel pannello comandi frontale alloggiano i regolatori acqua-spray e i selettori a leva degli strumenti. Il filtro batteriologico d'aspirazione è posizionato, invece, sul retro del trolley.



Con Dentacase il tuo lavoro diventerà una vacanza grazie alla sua struttura trolley.

Scheda tecnica e dotazioni


	Dentacase Codice UV4VA
Alimentazione elettrica	220/240V-50/60 Hz
Dimensioni	600 x 410 x 290 mm
Peso	30 Kg
Siringa DCI style	●
Cordone per turbina/micromotore pneumatico	● 2
Pedale	Progressivo a disco
Serbatoio acqua spray 1 lt	●
Sistema di aspirazione	A depressione d'aria
Filtro batteriologico	●
Compressore interno senza olio	●
Serbatoio	6 litri
Rumore	50dB(A)
Garanzia	24 mesi

Tavoli visite & operatori



Tutti i tavoli da visita veterinari sono costruiti in resistente acciaio inossidabile 304 e sono eccezionalmente facili da disinfettare, rendendoli ideali per ambienti sterili. I tavoli mobili sono dotati di ruote piroettanti per una facile manovrabilità.

Questa selezione di tavoli è progettata per soddisfare i requisiti richiesti dai medici veterinari.

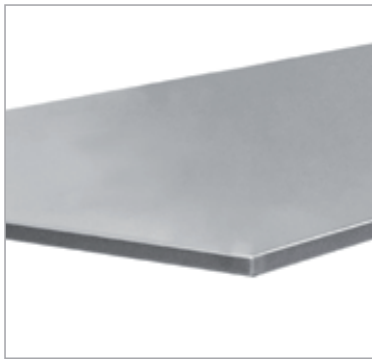

Piano di lavoro dello spessore di 40mm, realizzato con lamiera dello spessore di 1,5 mm e rinforzato e con rinforzi inox.



Struttura arretrata sui quattro lati per poter andare contro parete anche in caso di sguscia.



Dimensioni disponibili sia su piedini sia su ruote in diverse misure. Prodotto da azienda italiana azienda certificata ISO 9001 e 14001.

Scheda tecnica comparativa

	Codice Tavolo fisso	Codice Tavolo mobile
Piedini fissi	●	/
Ruote	/	●
Dimensione 1 1200x600x900 mm (lpxh)	TA01200X	TA01200XR
Dimensione 2 1500x600x900 mm (lpxh)	TA01500X	TA01500XR
Dimensione 3 1800x600x900 mm (lpxh)	TA01800X	TA01800XR

Attrezzatura

Micromotore elettrico

Compattezza, affidabilità, silenziosità e versatilità sono solo alcune delle caratteristiche offerte da questo micromotore. La rotazione consente di raggiungere velocità elevate con rumore e vibrazioni minime senza dissipazione di calore. In abbinamento al contrangolo o al manipolo diritto con attacco e-type, soddisferà a pieno le vostre esigenze.



Dotazione:

- Centralina di comando
- Manipolo micromotore attacco E-type
- Supporto manipolo
- Pedale

Codice articolo	MM15VET-N
Manipolo micromotore	MX922E
Velocità di rotazione	35.000 rpm
Tipologia di controllo	Banco
Reverse	●
Potenza	100 Watt
Torque	3,5 N.cm
Indicatore velocità	Analogico
Protezione sovraccarichi	●
Alimentazione	220V-50Hz
Peso micromotore	180 gr
Dimensioni micromotore (ØxL mm)	24 x 111
Peso box	1,5 Kg
Dimensioni box (Lxpxh)	115 x 153 x 77 mm
Garanzia	12 mesi

Micromotori pneumatici



Micromotore Ivory. Attacco 4-vie. Spray interno. Velocità massima 25.000 rpm. Attacco Intramatic. Ghiera per inversione di marcia.
Codice M714C



Micromotore Ivory. Attacco 6-vie con luce Led. Spray interno. Velocità massima 25.000 rpm. Attacco Intramatic. Ghiera per inversione di marcia.
Codice M714L



Micromotore VetLine. Attacco 4-vie. Spray esterno. Velocità massima 20.000 rpm. Attacco E-Type. Ghiera per inversione di marcia.
Codice HCP74MW

Turbine



Turbina Ivory .Testa standard. Sistema spray a 3 ugelli. Attacco 4-vie. Velocità massima 345.000 rpm. Senza fibra ottica. Push button. Cuscinetti in ceramica.
Codice S504M



Turbina VetLine. Testa standard. Sistema spray a 1 ugello. Attacco 4-vie. Velocità massima 380.000 rpm. Senza fibra ottica. Morsetto a chiave. Cuscinetti in acciaio.
Codice HCP118

Contrangoli



Contrangolo Ivory. Cieco. Rapporto 1:1. Spray interno.
Velocità massima 40.000rpm.
Push button. Attacco Intramatic
Codice SL411E



Contrangolo Ivory. Fibra ottica. Rapporto 1:1. Spray
interno. Velocità massima 40.000rpm.
Push button. Attacco Intramatic
Codice SL411L



Contrangolo VetLine. Cieco. Rapporto 1:1. Spray esterno
con clip spray codice ADP178. Velocità massima
20.000rpm. Morsetto a leva. Attacco E-type.
Codice ANR171-O

Diritti



Diritto Ivory. Cieco. Rapporto 1:1. Spray interno.
Velocità massima 40.000rpm. Push button.
Attacco Intramatic.
Codice SL211E



Diritto Ivory. Fibra ottica. Rapporto 1:1. Spray interno.
Velocità massima 40.000rpm. Push button.
Attacco Intramatic.
Codice SL211L




Diritto VetLine. Cieco. Rapporto 1:1. Spray esterno con
clip spray codice ADP179. Velocità massima 20.000rpm.
Morsetto a ghiera. Attacco ISO-Standard/ E-type.
Codice ANR177-O

Ablatori



Ablatore VetLine. Cioco. Attacco 4-vie.
Frequenza ultrasuoni (Hz) 5800~8000 \pm 5%.
3 inserti in dotazione compatibili Kavo (Sonicflex).
Codice HCP234

Sbiancanti

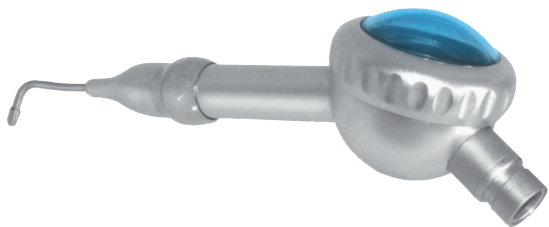


Sbiancante VetLine. Attacco 4-vie.
Alimentazione ad aria 2,8 bar.
Alimentazione acqua 1-2 bar.
Kit o-ring di ricambio.
Codice PL600H

Frese per strumentazione rotante



Frese per strumentazione rotante.
4 frese per turbina.
11 frese per contrangolo.
Codice SET80

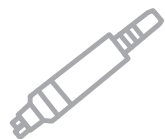

Apparecchiature e accessori



Crea il tuo studio veterinario ideale



Mobili e carrelli funzionali



Sistemi di illuminazione



Sterilizzazione



Comunicazione e diagnostica



Disinfezione ambiente



